

ProdPump 衛生高圧ポンプ

圧力のある流体の生産サンプルの衛生的な移送

特徴

- 高効率: ほとんどのホモジナイザーの 1/2 のエネルギー損失
- 体積: 一体化設計、重さが軽く、コンパクト
- 知能的: プログラミングによる制御システム
- ミュート: 高効率のミュート性能
- 強いパワー: 200L/hr 以上
- CE 基準や RoHS 基準に認められる

ピストンデュアルポンプ/フロー制御可能



ProdPump シリーズ電気サニタリー高圧ポンプは、タッチスクリーンで操作され、プログラムによってインテリジェントに制御される機器です。脂肪乳剤、リポソーム、ナノ懸濁液、脂質ミクロスフェア、ナノエマルジョン、乳製品、輸液、細胞破壊、ジュース均質性、ファインケミカルエンジニアリング、染料などの産業生産準備に使用できます。最大稼働圧力が 20,000 Psi/1500 Bar に達した。媒体と接触した部品全体は、FDA に認められる製薬食品用の材料を採用し、例えば 316L ステンレス、17-4PH ステンレス、チタン合金、炭化タンゲステン、PTFE、UHMWPE。

規格

カタログ番号	ProdPump-1500	ProdPump-1000	ProdPump-800	ProdPump-500	ProdPump-300
流量	80L/hr	100L/hr	120L/hr	180L/hr	200L/hr
最小サンプル容量	200mL	200mL	200mL	400mL	400mL
最大圧力	1500bar	1000bar	800bar	500bar	300bar
サイズ (cm)	140×70×40	140×70×40	140×70×40	140×70×40	140×70×40
重さ (kg)	~200	~200	~200	~200	~200
最高温度	80°C (176°F)				
パワー	380V/440V				
クリーニング	CIP/SIP/噴出洗浄				
特徴	圧力または衛生圧力ゲージのデジタル表示				




Phone: +1(323) 825-1851
Fax : +1(323) 978-4693
Email: Nano@Genizer.com
http://www.genizer.com/producepump_p0032.html

Discount available for public research. Genizer.com reserves the right to change specifications without notice. © 2009 by Genizer. All rights reserved. Japanese Version 091620.

ProdPump 衛生高圧ポンプ



ProdPump

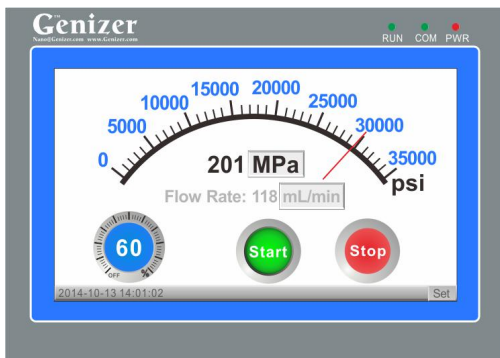


コントロールパネル

3 Steps for running the Product Pump

Step 2: Adjust the Speed from Low to High

Step 1: Sample from Inlet

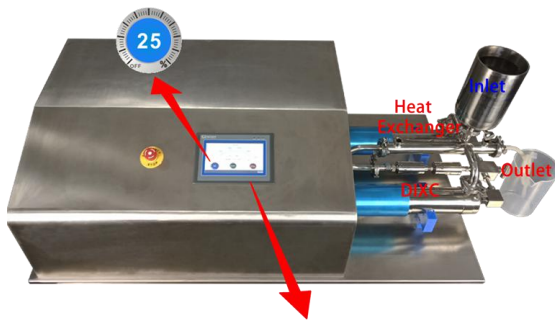

Step 3: Press the Start or Stop

基本配置

部品	1 セットのダイヤモンド相互作用チャンバー
制御システム	高圧プログラミング制御システム®: タッチスクリーン、速度制御、容量、時間、圧力または温度による自動停止制御、20mL まで設定可能な容量制御、流量と時間の表示、過負荷保護
圧力計	電氣的
入力型	2" 快速接続
出力型	2" 快速接続
輸入	オンライン、1000mL SUS316 シリンダー
輸出	オンライン、1000mL SUS316 シリンダー
製品材質	316L ステンレス、炭化タンゲステン、フッ素ゴム、PTFE、UHMWPE
材料基準	医療薬品級、FDA や GMP に認められる
保証期間	1 年以内の製造上の欠陥

利用可能なオプション

パーツ	高圧リポソーム押出機、均質化バルブ、熱交換器
冷却システム	衛生熱交換器(HPE350 または HPE450)
検出器	圧力計、圧力及び温度センサー
入/出力型	Luer、1" または 2" 快速接続または 3/8" 高圧カップリング
入力と出力	1 L、2 L ステンレス鋼の開いた貯蔵所; 2 L、5 L 加圧ステンレス鋼タンク; オンラインまたはタンク
シリンダー	チタン高圧シリンダー (耐酸及び耐アルカリ)